



DUKWOO
(Safe, Sharp, Soft)

Embryo Transfer Catheter

(3S-E.T.Cath-3.5)



3.5Fr-A

3.5Fr



(주)덕우메디칼
DUKWOO MEDICAL CO.,LTD.

3S-E.T.Cath (3S-Embryo Transfer Catheter)

(주입-배액용튜브 · 카테타 : Introduction-drainage tube and catheter)

■ 용도

- 정자 또는 수정된 배아를 자궁에 주입
- 체강내 체액을 배액하여 임상시험시 사용
- 수술부위 유착방지제 주입
- 기타 자궁내에 약물 주입

■ purpose

- injection sperm or in-vitro fertilized embryo into the womb
- discharge the body fluids from the coelom and use for clinic test
- inject anti-adhesion to prevent adhesion for operated region
- inject the medicinal substance into the womb, etc

■ 형명 및 규격 (model & standard)

REF 3S-E.T.Cath-3.5 , 3S-E.T.Cath-3.5-A

구분 (description)	길이(length)	굵기(size)	포장(packing)	비고(remark)
	120mm	3.5Fr	50pcs/Box	
	120mm	3.5Fr-A		마킹표시(marking)

■ 특징

- 튜브표면이 매끄럽고 팁이 정교하게 가공되어 체강에 주입시 상처 방지
- 필요한 길이만큼 사용
- 꺾임없이 주입 또는 흡입시 적절한 각도로 구부려 사용 가능
- 삽입시 필요길이 사용을 위한 마킹표시

■ special feature

- the surface of the tube is very smooth and the tip is manufactured elaborately to prevent injury while injecting to the womb
- you can adjust the length according to need
- the tube is kink resistance while inject, or you may bend with your intended angle
- marking for using the adequate length when inserting

■ 사용상 주의사항

- 1회용제품으로 재사용 금지
 - 멸균 유효기간 확인(제조일로부터 3년)
 - 제품의 포장상태 확인
 - 포장 개봉후 제품오염 방지
 - 마킹표시된 제품 사용시 마킹튜브 인체 삽입금지
 - 경부염증이 있는 경우 절대 사용금지
- *1ml 또는 2.5ml 1회용 멸균된 주사기를 준비 하세요

■ caution to use


- not for reuseable
 - check the package of the goods(3 years from manufacturing date)
 - check the package of the goods
 - after opening the package, use it immediately
 - do not insert the mark to human body when the marked product is used
 - if the patient has a cervical infection ,never use
- *Be prepare the disposable syringe with 1ml or 2.5ml(sterized one)

 (주)덕우메디칼
DUKWOO MEDICAL CO.,LTD.

경기도 화성시 비봉면 양노리701-5
#701-5, Yangno-Ri, Bibong-Myeon, Whaseong-Si, Gyeonggi-Do, Korea
Tel : +(82)-31-355-9330 Fax : +(82)-31-355-9335
E-mail : dwmdcath@yahoo.co.kr Home page : www.dukwooco.co.kr



DUKWOO
(Safe, Sharp, Soft)

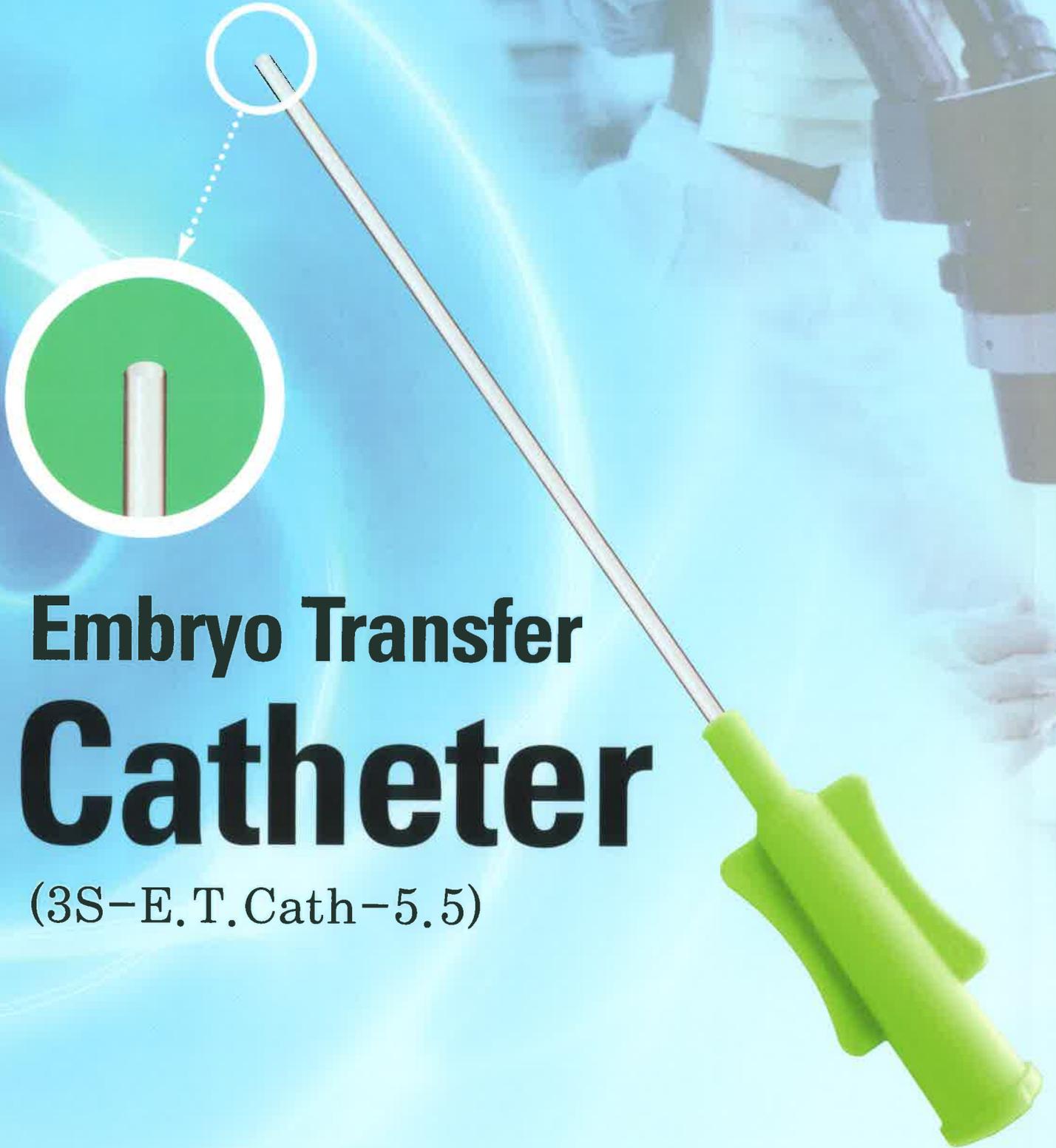

Embryo Transfer Catheter

(3S-E.T.Cath-5.5)




(주)덕우메디칼
DUKWOO MEDICAL CO.,LTD.

3S-E.T.Cath

(3S-Embryo Transfer Catheter)

(주입-배액용튜브 · 카테타 : Introduction-drainage tube and catheter)

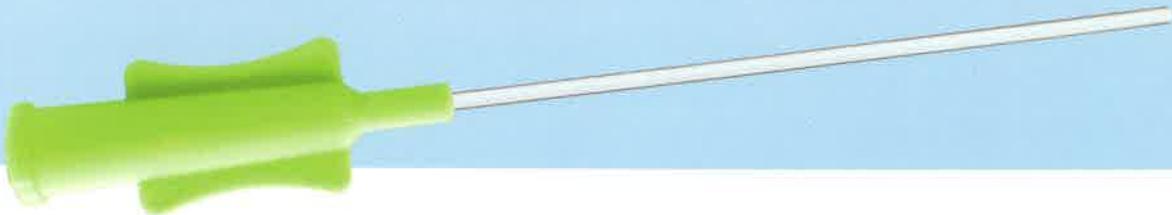

■ 용도

- 수술부위 유착방지제 주입
- 정자 또는 수정된 배아를 자궁에 주입
- 체강내 체액을 배액하여 임상시험시 사용
- 기타 자궁내에 약물 주입

■ purpose

- inject the anti-adhesion to prevent adhesion for operated region
- injecting sperm or in-vitro fertilized embryo into the womb
- discharge the body fluids from the coelom and use for clinic test
- inject the medicinal substance into the womb, etc

■ 형명 및 규격 (model & standard)

REF 3S-E.T.Cath-5.5

구분 (description)	길이(length)	굵기(size)	포장(packing)
		100mm	5.5Fr

■ 특징

- 튜브표면이 매끄럽고 팁이 정교하게 가공되어 체강내 삽입시 상처 방지
- 체강내 상처부위에 약물주입, 특히 유착방지제 직접주입 가능
- 꺾임없이 주입 또는 흡입시 적절한 각도로 구부려 사용 가능.

■ special feature

- the surface of the tube is very smooth and the tip is manufactured elaborately to prevent injury while injecting to the womb
- inject the medicinal substance to the wounded part in coelom, Especially it is possible to injecting the anti-edhesion directly
- the tube is kink resistance while inject, or you may bend with your intended angle

■ 사용상 주의사항

- 1회용제품으로 재사용 금지
- 멸균 유효기간 확인(제조일로부터 3년)
- 제품의 포장상태 확인
- 포장 개봉후 제품오염 방지
- 경부염증이 있는 경우 절대 사용금지
- *1ml 또는 2.5ml 1회용 멸균된 주사기를 준비 하세요

■ caution to use

- not for reuseable
- check the expiration date of the goods(3 years from manufacturing date)
- check the package of the goods
- after opening the package, use it immediately
- if the patient has a cervical infection, never use
- *Be prepare the disposable syringe with 1ml or 2.5ml(sterized one)